

Criado e fabricado por




PelviLine

MAX DUO

Eletrodo Intracavitário Vaginal

2 Canais para Eletromiografia
e Eletroestimulação

- Design retilíneo
- Ideal para anatomias maiores
- Análise de musculaturas profundas/anteriores
- Análise de lateralidade da musculatura

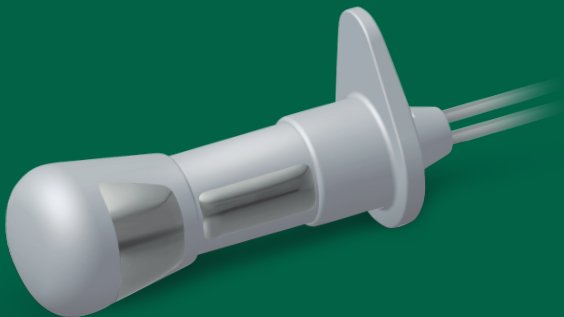

Para saber mais
Acesse nossa loja!

01
unidade

O eletrodo intracavitário vaginal PelviLine Max Duo é indicado para captação de sinais de eletromiografia (EMG), biofeedback e estimulação muscular do períneo. Possui design anatômico, cabo flexível para maior segurança e liberdade de movimento, corpo em plástico ABS e contatos em aço inoxidável. Produto destinado ao uso como acessório de sistemas de biofeedback e estimulação muscular, conforme normas aplicáveis da ANVISA.

INDICAÇÕES DE USO

Deve ser utilizado exclusivamente em um único paciente, podendo ser reutilizado por até 10 sessões, desde que higienizado adequadamente entre os usos conforme instruções deste manual. Não é destinado ao uso simultâneo nos dois canais. Recomenda-se, antes da sua utilização, uma prescrição de um profissional de saúde.

CONTRAINDICAÇÕES DE USO

- Se esta embalagem estiver violada;
- Se a paciente estiver em período pós-cirúrgico, período menstrual ou apresentar lesões no tecido;
- Se a paciente utilizar marca-passo, em caso de uso deste dispositivo para estimulação elétrica;
- Se a paciente apresentar feridas, irritações, alergias, secreções ou sinais de infecção na região de aplicação;
- Se a paciente demonstrar reação adversa ou desconforto incomum, interromper o uso imediatamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Os eletrodos PelviLine Max Duo são acondicionados em embalagem individual;
- As dimensões do eletrodo são: **83mm x 28mm**;
- Material ABS de alta resistência mecânica;
- Contatos metálicos em aço inoxidável;
- Peso: 26g.

INSTRUÇÕES DE USO

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e acesse as instruções de uso:



INSTRUÇÃO PARA REPROCESSAMENTO

Após cada uso, com luvas de procedimento descartáveis, remover resíduos com papel toalha seco e **friccionar toda a superfície do eletrodo com gaze ou pano descartável embebido em álcool 70%**, garantindo contato por no mínimo 30 segundos. Deixar secar ao ar. Armazenar em recipiente limpo e seco identificado com nome do paciente e número de reuso.

COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS

Os eletrodos intracavitários vaginais PelviLine Max Duo foram desenvolvidos para utilização junto aos eletromiógrafos da Miotec, podendo ser utilizados em equipamentos de eletroestimulação com certificado de avaliação em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 válido. Consultar a Miotec para verificar a necessidade de cabo adaptador para a utilização do produto. Para uso em 2 canais, o equipamento deve possuir dois canais e sensores adequados.

GARANTIA E VALIDADE

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante apresentação de nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade. Este produto foi validado para reutilização no mesmo paciente por até 10 ciclos, desde que seguidas rigorosamente as orientações de higienização e armazenamento.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Higienize após cada uso, armazene em embalagem limpa e seca, **identificada com nome do paciente e número de reuso**.

DESCARTE

Os eletrodos PelviLine Max Duo são de uso individual e devem ser descartados após 10 utilizações ou antes, caso apresentem desgaste, danos ou falha na higienização. Os produtos são previamente higienizados com álcool isopropílico e após o uso devem ser descartados em lixo hospitalar.

1 Uso individual

2 Higienizar após o uso

3 Produto passível de reprocessamento


4 Descartar em lixo hospitalar

A MIOTEC NÃO SE RESPONSABILIZA PELO USO INDEVIDO DESTA EMBALAGEM.

O ELETRODO DEVE SER UTILIZADO E DESCARTADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DESTA EMBALAGEM.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21. End: Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis — CEP 90460-210 — Porto Alegre / RS.
Resp. Técnico: Fabiano Pires Ergoni CREA-RS: 113407
Registro ANVISA: 80351690003 – loja.miotec.com.br



7 898975 352247 >